


Overview & Quick Reference Guide

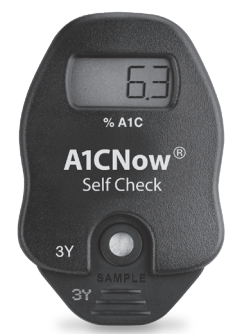


A1CNow® Self Check

Test System

Note: All instances of the box or pouches in this insert are representative ONLY. Please refer to the packaging included with your specific kit.

IMPORTANT!

- FIRST**, we strongly recommend you read all instructions carefully and watch the brief instructional video on our website at ptsdiagnostics.com. **THEN**, follow all steps as you perform the test.
- Do not** open pouches until instructed.
- Make sure lot number on analyzer matches lot numbers on pouches.
- Use indoors between 18°C – 25°C /64°F – 77°F and out of direct sunlight.
- Do not use if product is past the expiration date.
- If the kit has recently been kept at temperatures outside the recommended conditions, keep the kit at room temperature for at least one hour before use.

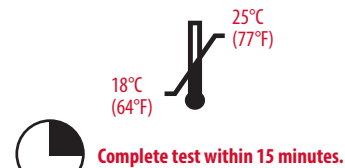


Complete test within 15 minutes.

- DO NOT** adjust your medication unless instructed to do so by your doctor or healthcare provider.
- If you have any questions about your A1C result, please contact your doctor or healthcare provider.


Caution: This device contains material of animal origin and should be handled as a potential carrier and transmitter of disease.

If you are not able to access the instructional video on our website, we encourage you to call customer service at 1-877-870-5610 (toll-free in US and Canada) or +1-317-870-5610 (direct) to walk you through the test.

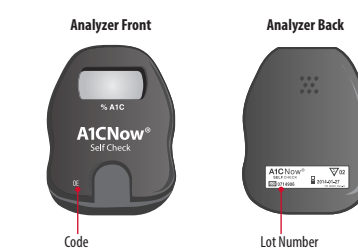


Match Lot Numbers

Use analyzer only with the materials included in the original kit. The analyzer will expire after the programmed number of tests have been run. If another test cartridge is inserted, the analyzer will display "00TL".

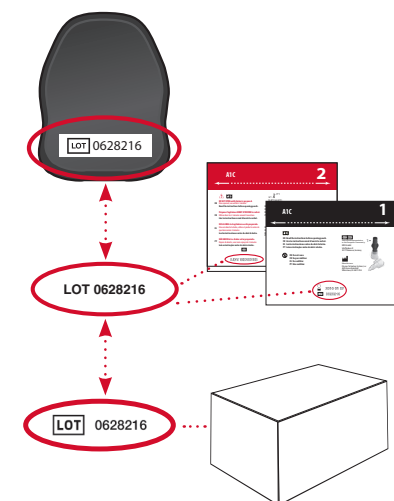



1 Open Plastic Shaker Pouch*

Do NOT open foil cartridge pouch until Step 6.

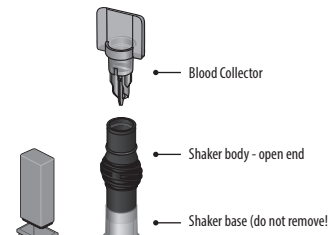

2 Stick Finger



- Wash hands or clean with alcohol and dry before testing.
- Remove cap and press lancet into finger.
- Gently squeeze finger to get adequate blood.

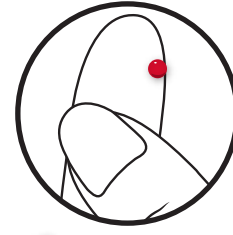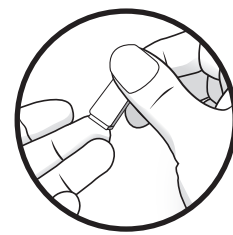

Actual size required

3 Collect Blood



- Gently touch blood collector to top of blood drop to fill.
- Make sure collector is adequately filled.

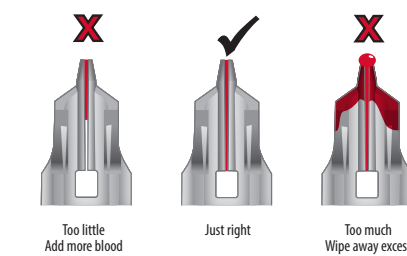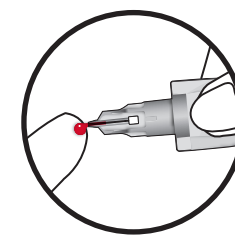

Too little Add more blood Just right Too much Wipe away excess

4 Insert Blood Collector


- Fully insert blood collector into shaker body.
- Push hard while twisting to fully insert.

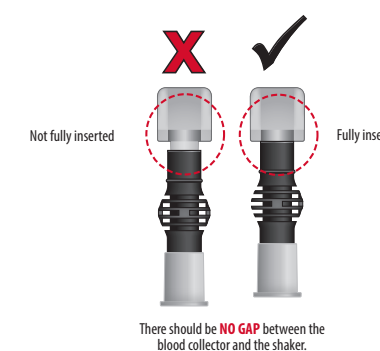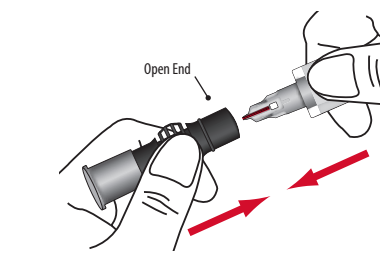

There should be **NO GAP** between the blood collector and the shaker.

5 Mix


- Shake vigorously 6-8 times (about 5 seconds).
- This will mix the blood with the solution.
- Stand shaker on table while preparing cartridge.

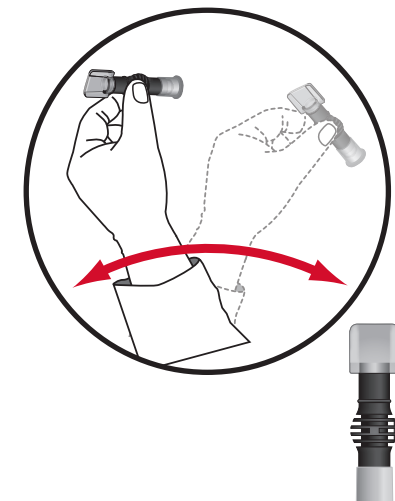

6 Open Foil Cartridge Pouch* AFTER Blood Collection

- Insert cartridge into analyzer immediately and use within 2 minutes.
- Tear foil pouch open at the notches on the sides.

Caution: Do NOT open foil pouch until this step. Use within 2 minutes of opening. If foil pouch is damaged, do not use.

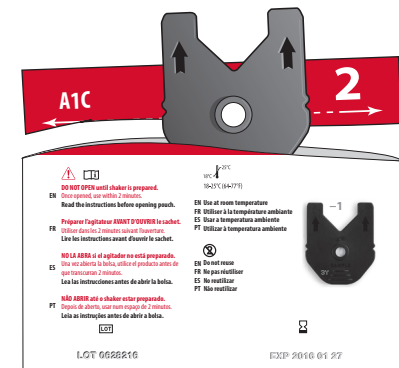

7 Insert Cartridge

- "Click" test cartridge into place.
- Analyzer and test cartridge codes must match.
- If codes do not match, call Customer Service at 1-877-870-5610 (toll-free in US and Canada) or +1-317-870-5610 (direct).




Match codes

If analyzer and cartridge codes do not match, call Customer Service at 1-877-870-5610 or +1-317-870-5610.


8 Prepare Shaker

Remove shaker base.

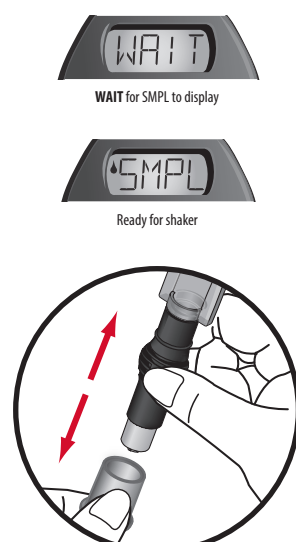


9 Dispense Sample into Cartridge

- Ensure analyzer is on level surface.
- Push down completely to dispense diluted sample and remove in a continuous motion.
- Remove sampler from cartridge quickly.
- "RUN" will appear.

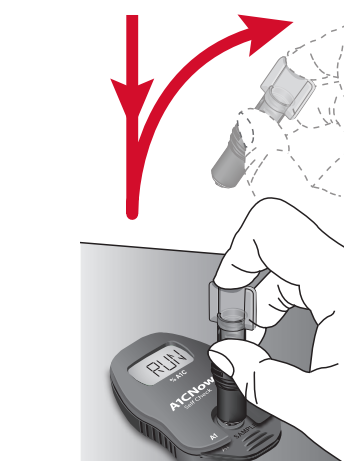

Do not handle analyzer again until test is complete!

10 5 Minutes to Results

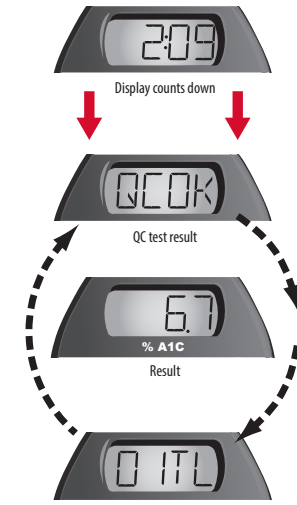

- This result cycle remains displayed for 15 minutes or until the next test cartridge is inserted.
- If "QCOK" is not displayed, please refer to the troubleshooting section or contact Customer Service.

11 Dispose of Cartridge / Save Analyzer

- Dispose of cartridge in your household waste.
- Save analyzer for additional tests. Analyzer will display, for example, "01TL" if there is one test left and "00TL" if you just used your last test.
- Record your A1C result in the result log in Step 12.
- Analyzer will show result for 15 minutes and will turn off automatically.



NOTE: To run another test, use a new shaker, blood collector, test cartridge, and lancet from the same kit and return to Step 1.

12 Log Result

Chart your progress here.

Record your A1C results here, and bring this with you when you see your doctor. Mark down your A1C goal in the space provided.

Date:
A1C Result:
A1C Goal:

Date:
A1C Result:
A1C Goal:

Date:
A1C Result:
A1C Goal:


Date:
A1C Result:
A1C Goal:

Result Interpretation

- Do not take any decision of medical relevance without first consulting your healthcare practitioner.
- When this device is used for monitoring of an existing disease, adapt the treatment **only** if you have received the appropriate training to do so.

* Pouch illustrations may vary.

Áttekintés és Rövid tájékoztató

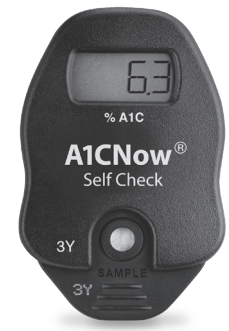


A1CNow® Self Check

Tesztrendszer

Megjegyzés: Ebben a beteg tájékoztatóban minden doboz vagy tasak CSAK reprezentatív példány. Kérjük, tekintse meg az Ön által használt készlethez mellékelt csomagolást.

FONTOS!

- ELŐSZÖR**, javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a ptsdiagnostics.com weboldalunkon található rövid oktatóvideót. **EZUTÁN**, az összes lépést követve végezze el a tesztet.
- NE** nyissa ki a tasakokat az utasításig.
- Győződjön meg róla, hogy a mérőeszközön lévő tételesszám megegyezik a tasakon lévő tételesszámmal.
- Betérben 18°C – 25°C /64°F – 77°F között és közvetlen napfénytől védve használja.
- Ne használja a termék lejáratí ideje után.
- Ha a készüllet a közelmúltban az ajánlott hőmérsékleten kívül tárolták, használat előtt legalább egy órán át tartsa szobahőmérsékleten.

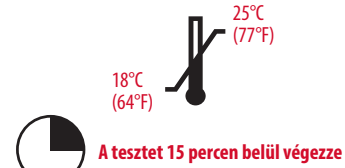

A tesztet 15 percen belül végezze el.

- NE** módosítsa a gyógyszereit, kivéve, ha kezelőorvosa vagy a gondozását végző egészségügyi szakember erre utasítja.
- Ha bármilyen kérdése van az A1C-eredményével kapcsolatban, kérjük forduljon kezelőorvosához vagy egészségügyi szolgáltatójához.

Figyelem: Ez az eszköz állati eredetű anyagot tartalmaz, és betegség potenciális hordozójaként és továbbítójaként kell kezelni. További információkért lásd a beteg tájékoztató hátoldalát.

Ha nem tud hozzáférni a weboldalunkon található oktatóvideóhoz, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot az 1-877-870-5610-es (az USA-ban és Kanadában díjmentes) vagy a +1-317-870-5610-es (közvetlen) telefonszámon, hogy végigvezessék a teszten.




Kód

Tételesszám


A tételesszámok egyeztetése

A mérőeszközt csak az eredeti készletben található anyagokkal használja. A mérőeszköz a beprogramozott számú teszt lefutása után érvényét veszti. Ha egy másik tesztpatront helyez be, a mérőeszköz a „00TL” feliratot jeleníti meg.

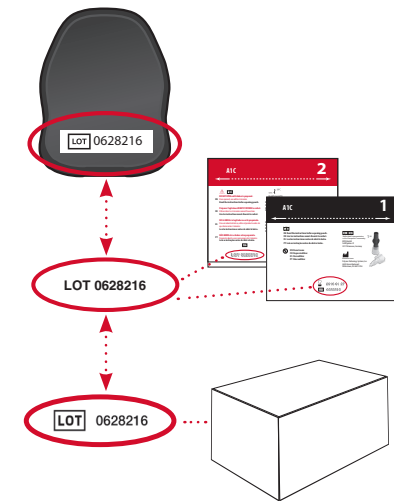

1 A műanyag rázótasak nyitása*

A 6. lépésig NE nyissa ki a fóliapatron-tasakot.


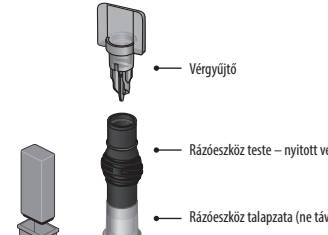


Vérgyűjtő Rázóeszköz teste – nyitott vég Rázóeszköz talpazata (ne távolítsa el!)

Lándzs

2 Ujjbegy szúrás



- A vizsgálat előtt mossa meg vagy tisztítsa meg alkohollal, és szárítsa meg a kezét.
- Vegye le a kupakot, és nyomja a lándzsát az ujjába.
- Finoman nyomja meg az ujját, hogy elegendő vért kapjon.

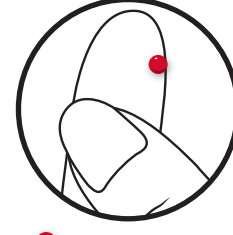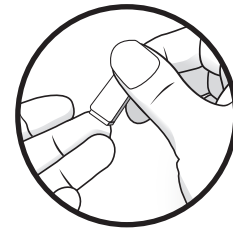

Ténylegesen szükséges mennyiség

3 A vér összegyűjtése



- Finoman érintse meg a vérgyűjtőt a vércsepp tetéjén a feltöltéshez.
- Gondoskodjon róla, hogy a gyűjtő megfelelően fel legyen töltve.

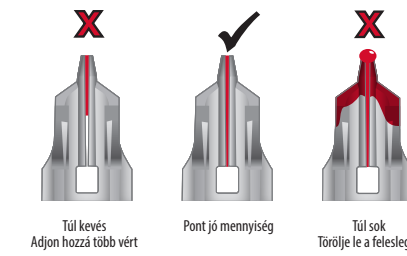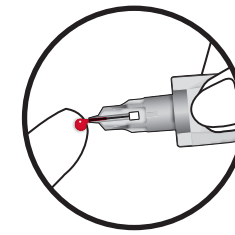

Túl kevés Adjon hozzá több vért Pont jó mennyiség Túl sok Távolítsa le a felesleget

4 A vérgyűjtő beillesztése


- Teljesen helyezze be a vérgyűjtőt a rázóeszköz testébe.
- A teljes behelyezéshez erősen nyomja be csavará modulattal.

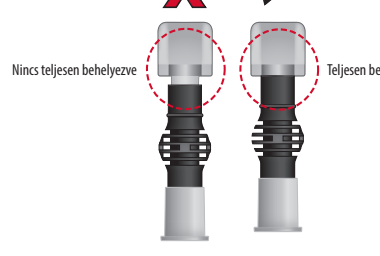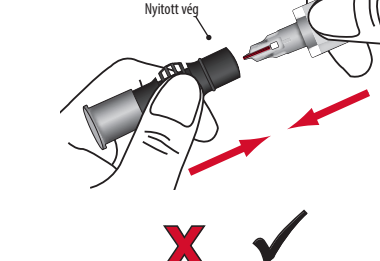

A vérgyűjtő és a rázóeszköz között **NEM** szabad **RESEK** lennie.

5 Összerázás


- Erőteljesen rázza fel 6-8 alkalommal (kb. 5 másodperig). Ezáltal a vér összekeveredik az oldattal.
- Állítsa a rázóeszközt az asztalra a patron előkészítése közben.

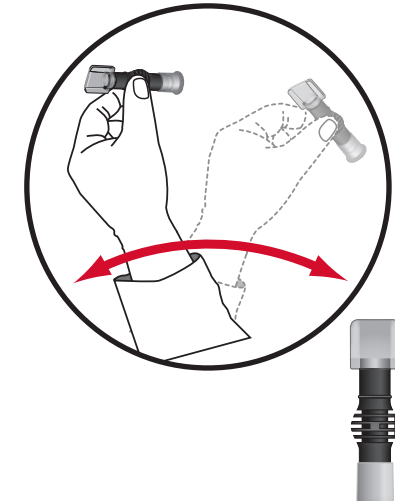

6 A vérvétel UTÁN nyissa ki a fóliapatron-tasakot*


- Azonnal helyezze be a patronat a mérőeszközbe, és 2 percen belül használja fel.
- Tépje fel a fóliatasakot az oldalán lévő bevágásoknál.

Figyelem: NE nyissa ki a fóliatasakot ennél a lépésnél korábban. A felnyitástól számított 2 percen belül használja fel. Ne használja, ha a fóliatasak sérült.

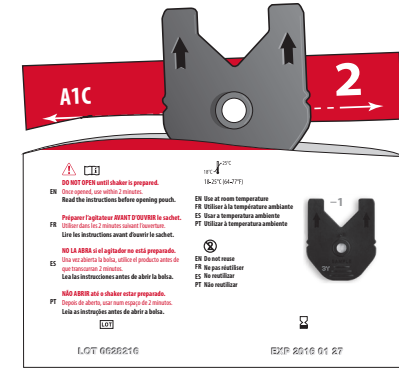

7 A patron behelyezése

- "Patintás" a tesztpatront a helyére.
- A mérőeszköz és a tesztpatron kódjainak egyeznie kell.
- Ha a kódok nem egyeznek, hívja az ügyfélszolgálatot az 1-877-870-5610-es (az USA-ban és Kanadában díjmentes) vagy a +1-317-870-5610-es (közvetlen) telefonszámon.

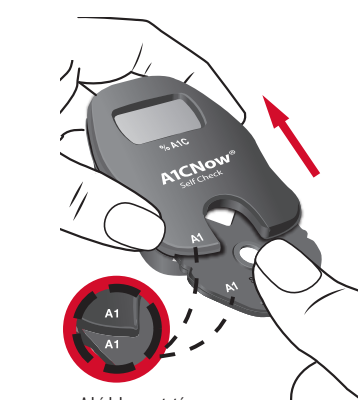


A kódok egyeztetése

Ha a mérőeszköz és a patron kódjai nem egyeznek, hívja az ügyfélszolgálatot az 1-877-870-5610-es vagy a +1-317-870-5610-es telefonszámon.

8 A rázóeszköz előkészítése

Távolítsa el a rázóeszköz talpazatát.

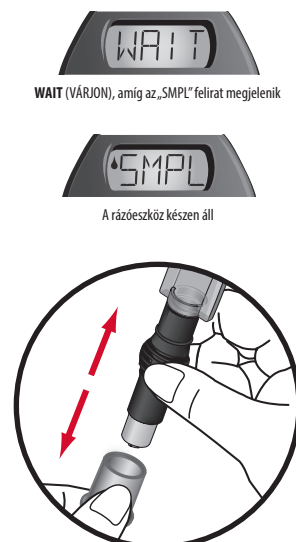


9 A minta adagolása a patronba

- Gondoskodjon róla, hogy a mérőeszköz vízszintes felületen álljon.
- Nyomja le teljesen a hígított minta adagoláshoz, és folyamatosan mozgassa távolítsa el belőle.
- Gyors mozdulattal vegye ki a mintavevőt a patronból.
- Megjelenik a „RUN” (Futtatás) felirat.



A teszt befejezéséig ne érintse meg a mérőeszközt!

10 5 perc az eredményig

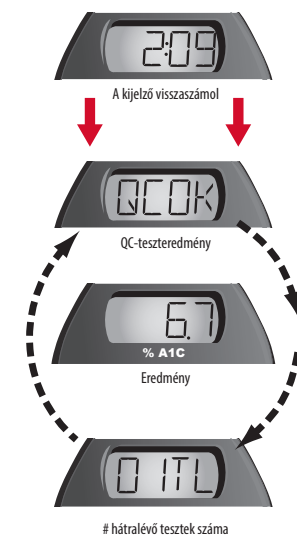

- Ezek az eredmények 15 percig vagy a következő tesztpatron behelyezéséig láthatók.
- Ha a „QCOK” felirat nem jelenik meg, kérjük, olvassa el a hibaelhárítási részt, vagy vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

11 Patron ártalmatlanítása / Mérőeszköz megőrzése

- A patronot dobja a háztartási hulladékok közé.
- Őrizze meg a mérőeszközt további tesztekhez. A mérőeszköz például a „01TL” feliratot jeleníti meg, ha csak egy teszt van hátra, és a „00TL” feliratot, ha Ön felhasználta az utolsó tesztet.
- Jegyezze fel az A1C-eredményét a 12. lépésben található eredménynaplóba.
- A mérőeszköz 15 percig mutatja az eredményt, és automatikusan kikapcsol.



MEGJEGYZÉS: Egy másik teszt futtatásához használjon egy új rázóeszközt, vérgyűjtőt, tesztpatront és lándzsát ugyanaból a készlethez, és térjen vissza az 1. lépéshez.

12 Az eredmény naplózása

Tüntesse fel az előrehaladását itt.

Jegyezze fel az A1C-eredményeit, és vigye magával, ha orvoshoz megy. Jelölje meg az Ön A1C-célját a megadott helyen.

Date (Dátum):
A1C Result (Eredmény):
A1C Goal (Cél):

Date (Dátum):
A1C Result (Eredmény):
A1C Goal (Cél):

Date (Dátum):
A1C Result (Eredmény):
A1C Goal (Cél):

Date (Dátum):
A1C Result (Eredmény):
A1C Goal (Cél):

Az eredmények értelmezése

- Ne hozzon semmilyen orvosi vonatkozású döntést anélkül, hogy előzetesen ne konzultálna orvosával.
- Ha ezt az eszközt egy meglévő betegség megfigyelésére használja, **csak akkor** módosítsa a kezelést, ha erre megfelelő képzésben részesült.

* A tasakok illusztrációk a valóságban eltérhetnek.

